

BlueLavage®

Das umweltfreundliche Lavage-System für die Orthopädie und Unfallchirurgie



Ressourcenschonend



65% weniger CO₂*



Made in Germany



german
ecodesign
award

EFFIZIENZPREIS
NRW



EUROPÄISCHE UNION
Investition in unsere Zukunft
Europäischer Fonds
für regionale Entwicklung

*als konventionelle Einwegsysteme




Die nächste Generation der Pulse Lavage

Die BlueLavage® ist ein völlig neuartiges steriles single use Pulse Lavage Spülsystem, wie es vielfach in der Orthopädie und Unfallchirurgie zur Anwendung kommt.

In dem BlueLavage® Handstück sind keine elektronischen Bauteile enthalten. Das System wird mit einer separaten Antriebseinheit, der sogenannten "DriveUnit", angetrieben. Die DriveUnit ist eine wiederverwendbare Antriebseinheit. Nach Erreichen der maximalen Nutzungsdauer wird die DriveUnit von uns ausgetauscht und recycelt. Zum Aufladen der DriveUnit wird das mitgelieferte 4-fach-Ladegerät verwendet. Die DriveUnit verfügt über eine smarte LED-Betriebsanzeige. Durch den transparenten Gehäusedeckel des BlueLavage® Handstücks ist die LED- Betriebsanzeige immer sichtbar. Ein Farbcode zeigt den Lade- und Betriebszustand der DriveUnit an und weist rechtzeitig auf einen bevorstehenden Austausch hin.

Durch den Verzicht auf Batterien und das Wegfallen von jeglichen Metallteilen im BlueLavage® Handstück werden Tonnen von Sondermüll vermieden.


In der für die DriveUnit vorgesehene Ladestation können immer griffbereit bis zu 4 DriveUnits gleichzeitig aufgeladen werden. Durch das selbsterklärende Design ist die Handhabung der BlueLavage® sicher, schnell und einfach.

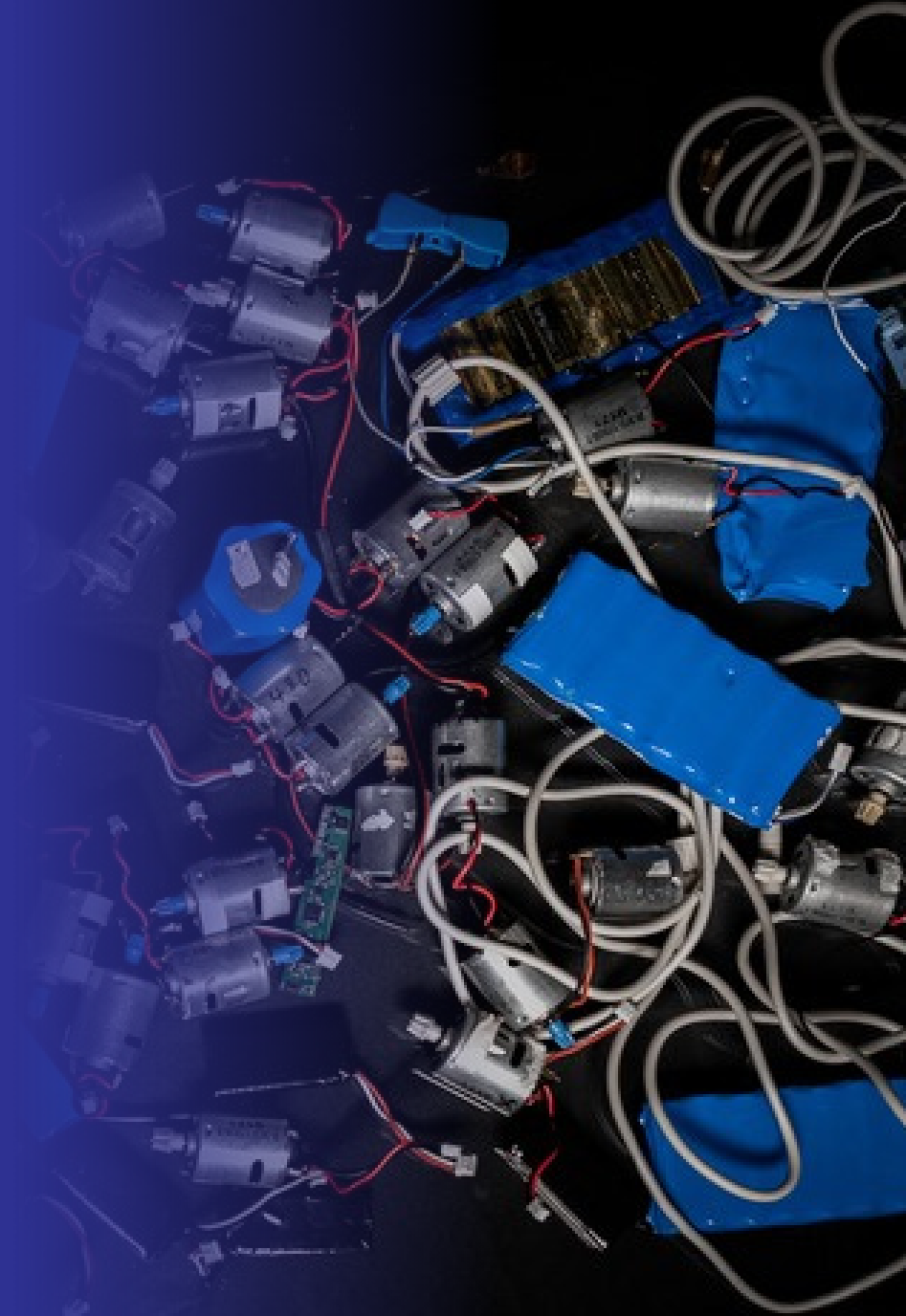

Unsere Mission

"In der Entwicklung des Produktes lag der Fokus darauf, keinen Elektroschrott zu verursachen und keine Batterien zu verwenden, sowie ressourcenschonend zu produzieren, um einen verantwortungsbewussten & umweltfreundlichen Ansatz zu verfolgen."

Olaf Thiessies, Geschäftsführer der UTK Solution GmbH

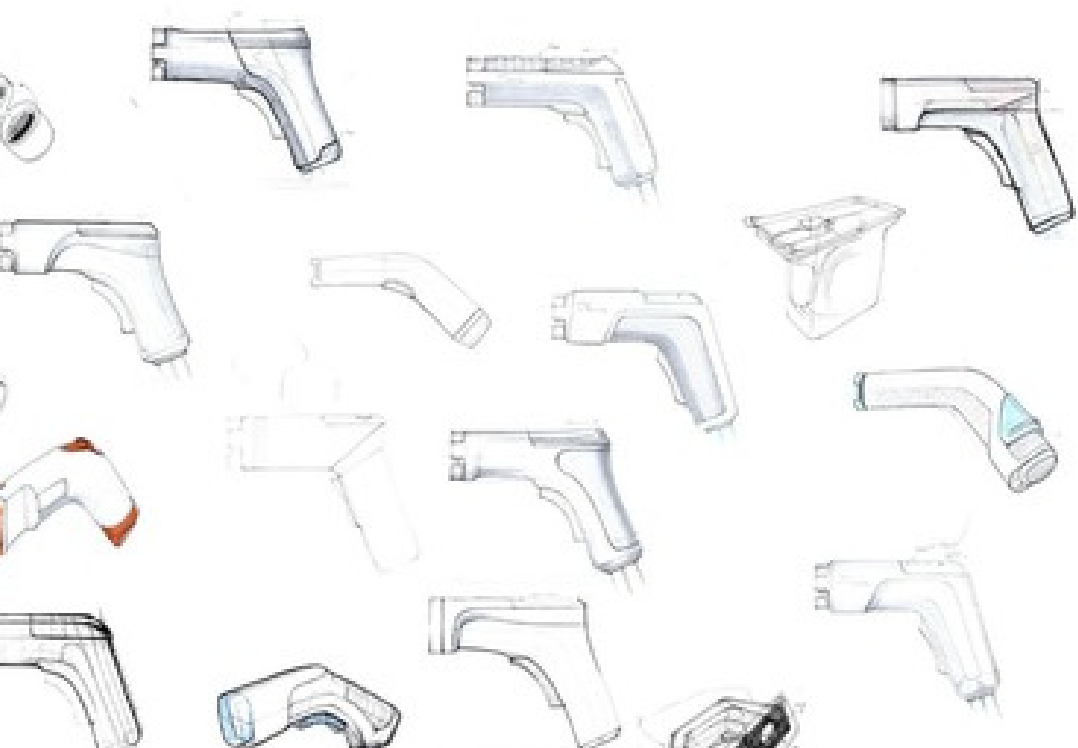

Nachhaltig

Die BlueLavage® verursacht 65% weniger CO₂* und keinerlei Elektroschrott.



Regional

BlueLavage® ist das einzige in Deutschland hergestellte Lavage-System.



Preisgünstig

BlueLavage® ist preisgünstig und reduziert Klinik-Entsorgungskosten.



Lieferfähig


BlueLavage® ist immer lieferfähig, und auch die Preise bleiben stabil.

*als konventionelle Einwegsysteme


BlueLavage®... klimaschonend und unaufdringlich im Sound

Effizienz ist kein Zufall.

Das BlueLavage® System verursacht 65 % weniger schädliches CO₂ als vergleichbare Produkte*.

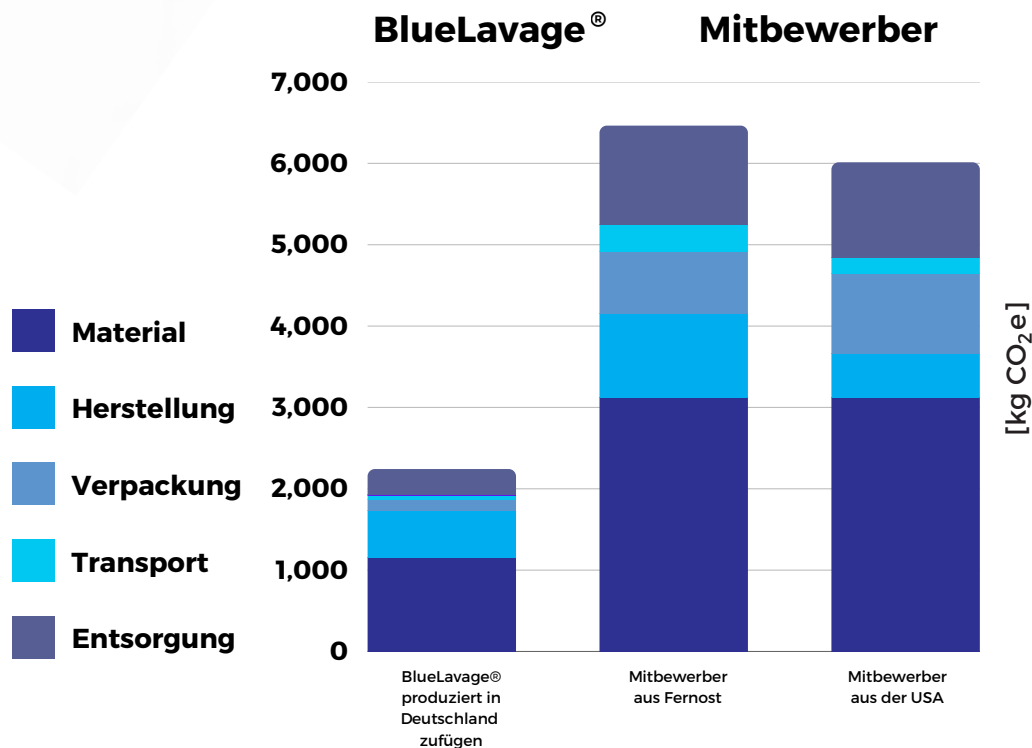

Sehr gute Leistung ohne Lärmbelästigung.
Das BlueLavage® System überzeugt mit einem sonoren Sound, der deutlich leiser ist als vergleichbare Produkte*.

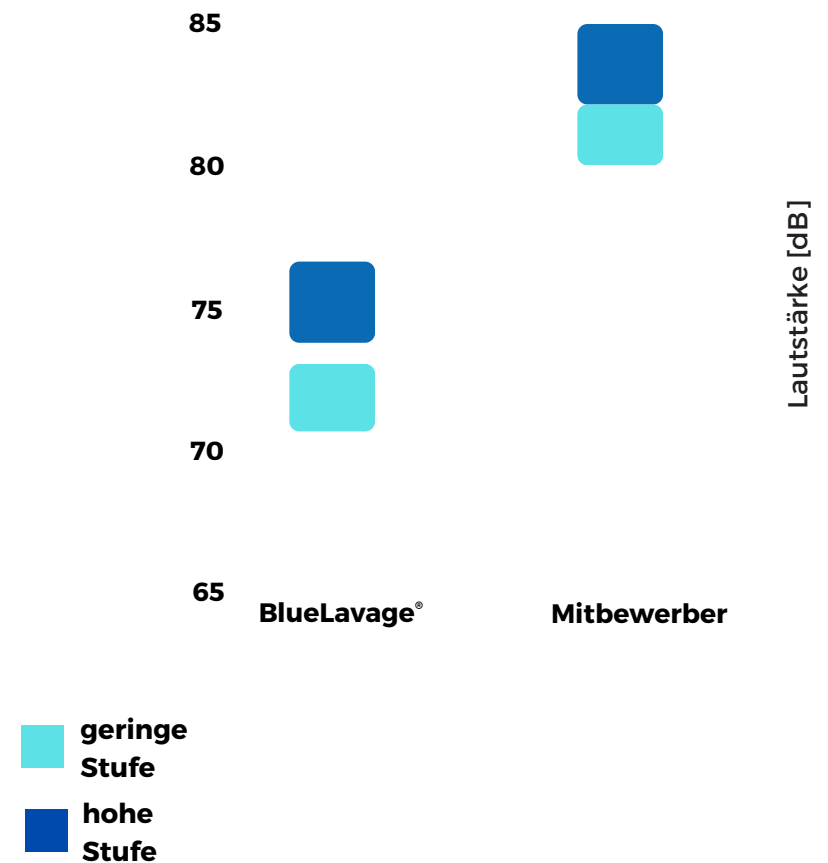

Das umweltschonende, innovative und leistungsstarke BlueLavage® Spülsystem

Leistungsstark

- Zwei Spülstufen wählbar
- HighSpeed-Stufe Durchflussrate über 1.200 ml/min
- LowSpeed-Stufe Durchflussrate von 600 ml/min
- Konstanter Spüldruck von 1 bar (15 psi)

Umweltfreundlich

- Das BlueLavage® System verursacht keinen Elektroschrott, keinen Batteriemüll und verursacht 65 % weniger schädliches CO als vergleichbare Produkte
- Austausch und Recycling der Antriebseinheit (DriveUnit) durch den Hersteller
- Schlauchsystem ohne schädliche oder verbotene Weichmacher
- Es werden nur recycelbare und biokompatible Kunststoffe verwendet, die nach DIN EN 10993-5 getestet sind

Ausgezeichnet

- Dem Hersteller, der UTK-Solution GmbH aus Lüdenscheid, wurde 2019 der "NRW Effizienz-Preis" für die Entwicklung des BlueLavage® System verliehen

Innovativ

- Betrieb durch eine wiederverwendbare Antriebseinheit, der sogenannten DriveUnit
- Elektronisch geregelte Motorsteuerung
- Reduzierte Geräuscentwicklung
- Sensitiver 2-Stufenschalter mit Dauerlaufoption
- Während der Anwendung informiert Sie das smarte LED-Licht über den aktuellen Betriebszustand
- Sensorische Überwachung der wichtigsten Parameter
- Patentierte Verriegelung der DriveUnit im BlueLavage® Gehäuse

Benutzerfreundlich

- Dank der neuen Doppel-Tyvek® Verpackung lässt sich die BlueLavage® auch unter Beachtung der sterilen Kautelen einfach öffnen und entnehmen
- Einfaches laden der Antriebseinheit (DriveUnit)
- Einfacher und sicherer Wechsel der verschiedenen Spülaufsätze
- Perfektes Handling durch das sehr geringe Gewicht und das Fehlen von störenden Elektrokabeln oder Druckluftschläuchen
- Ruhiger und vibrationsarmer Lauf
- Mit der BlueLavage® sind Sie unabhängig von der ZSVA und es entstehen keine Kosten für die Aufbereitung und Sterilisation



BlueLavage® Spülsystem im Detail

WIEDERVERWENDBARER
ANTRIEB "DRIVEUNIT"

LED-
BETRIEBSANZEIGE

SCHUTZABDECKUNG
ZUM EINSETZEN DER
DRIVEUNIT

ILLUMINIERTER
VERSCHLUSSECKEL

SICHERHEITSARRETIERUNG
FÜR DIE SPÜLAUFSÄTZE

SENSITIVER 2-
STUFENSCHALTER
MIT
DAUERLAUFOPTION



BlueLavage® DriveUnit und Dockingstation

Elektronische Kennzahlen DriveUnit

- Lithium-Polymer-Akkumulator
- Elektronisch geregelte Motorensteuerung
- Permanente elektronische Überwachung wichtiger Parameter während des Betriebs
- Überwachung durch Sensoren
- Hohe Kapazität der DriveUnit für ein optimales Reinigungsergebnis
- DriveUnit wird nach Lebensdauer getauscht
- DriveUnit wird recycelt

Elektronische Kennzahlen Dockingstation

- Ladeschale zum gleichzeitigen Aufladen von 4 DriveUnits
- Versorgungsspannung Netzteil 100 bis 250 V AC
- Abmessungen: Breite 165 mm, Höhe 55 mm, Tiefe 146 mm

Sicherheitsinformation BlueLavage® Dockingstation - DriveUnit

- BlueLavage® Dockingstation und DriveUnit werden unsteril geliefert
- Sterilisation der BlueLavage® Dockingstation und DriveUnit ist nicht erlaubt
- Verantwortung für sachgerechte Reinigung/Desinfektion liegt beim Betreiber und Produktanwender
- Maschinelles Aufbereitungsverfahren (Reinigung, Desinfektion etc.) ist nicht zulässig
- Nur Wischdesinfektion* ist erlaubt



Bedeutung der LED-Signale

Lichtsignale der DriveUnit während des Betriebs



Dauerlicht grün

Der Lithium-Polymer-Akku ist zu 100 % geladen.



Dauerlicht gelb

Nach ca. 1 Minute schaltet das LED-Lichtsignal von Dauerlicht grün auf Dauerlicht gelb um. Das gelbe Dauerlicht signalisiert, dass die DriveUnit weiterhin einsatzbereit ist, aber dass sie vor dem nächsten operativen Einsatz wieder vollständig aufgeladen werden muss.



Schnell gelb blinkend


Laden notwendig.



Dauerlicht rot

Die DriveUnit hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht oder ist defekt. Kontaktieren Sie uns für den Austausch.

Lichtsignale beim Laden der DriveUnit

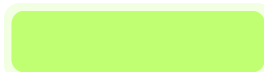

Dauerlicht grün

Der Lithium-Polymer-Akku ist zu 100 % geladen.



Langsam gelb blinkend

Ladevorgang aktiv.



Blau blinkend

Ladevorgang aktiv, aber die DriveUnit muss bald ausgetauscht werden.



Dauerlicht rot


Die DriveUnit hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht oder ist defekt. Kontaktieren Sie uns für den Austausch.



Kein Lichtsignal

Die Dockingstation ist ohne Stromversorgung oder die Dockingstation oder DriveUnit sind defekt.

Einsetzen der DriveUnit und Spülaufsätze

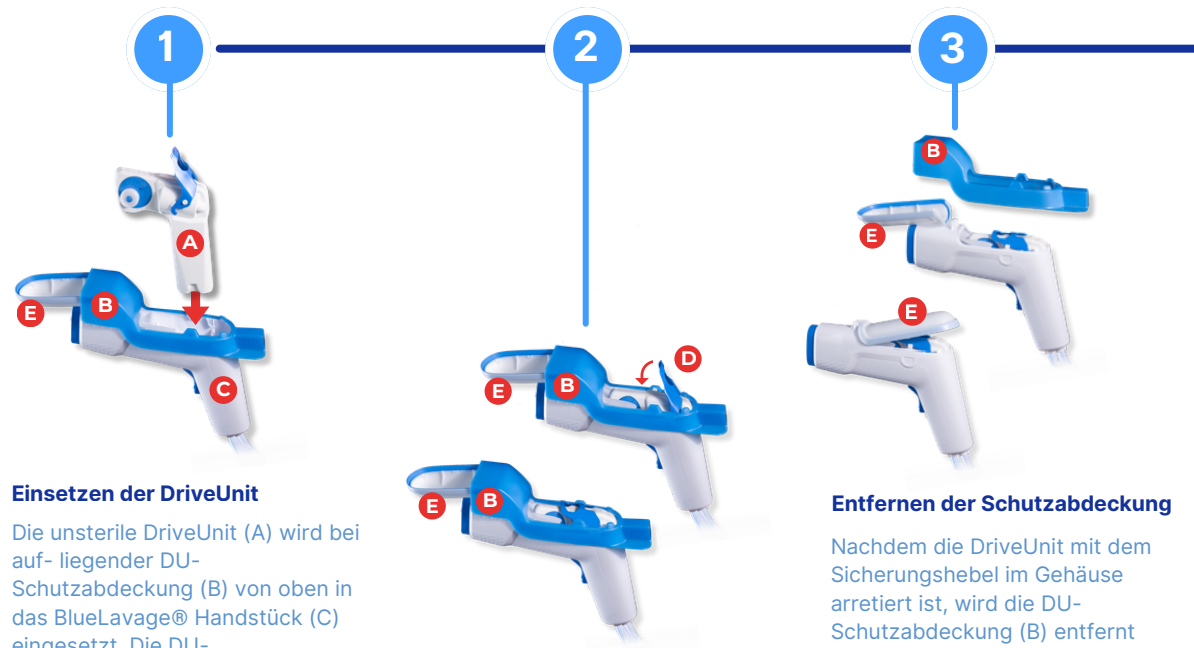

Einsetzen der DriveUnit

Die unsterile DriveUnit (A) wird bei auf- liegender DU- Schutzabdeckung (B) von oben in das BlueLavage® Handstück (C) eingesetzt. Die DU- Schutzabdeckung verhindert eine versehentliche Kontamination des sterilen BlueLavage® Handstücks und wird nach Einsetzen der DriveUnit vom OP-Springer abgenommen.

Sichern der DriveUnit


Sobald die DriveUnit vollständig in das BlueLavage® Handstück eingesetzt ist, muss der Sicherungshebel (D) vom OP-Springer nach unten gedrückt werden, damit die DriveUnit sicher im Handstück arretiert ist.

Entfernen der Schutzabdeckung

Nachdem die DriveUnit mit dem Sicherungshebel im Gehäuse arretiert ist, wird die DU- Schutzabdeckung (B) entfernt und der Verschlussdeckel (E) geschlossen. Der Verschlussdeckel wird durch innenliegende Sicherungsclips in seiner geschlossenen Position sicher fixiert.

Einsetzen der DriveUnit und Spülaufsätze

4

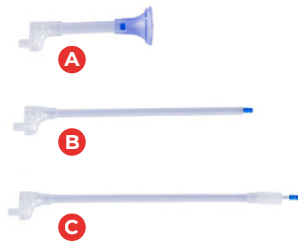


Die Spülaufsätze

Für den Einsatz der BlueLavage® stehen Ihnen 3 verschiedene Spülaufsätze zur Verfügung.

- A) Knie-Endoprothetik + Wunddebridement
- B) Hüft-Endoprothetik
- C) Hüftrevisions-Endoprothetik


5

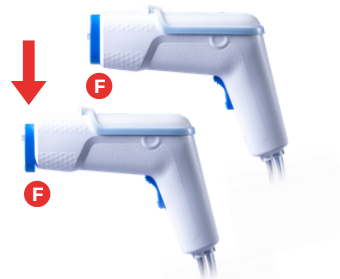

Fixierung der Spülaufsätze

Alle Spülaufsätze werden von vorn in das BlueLavage® Handstück geschoben. Zum Öffnen des Arretierungsverschlusses den Sicherungsclip (F) nach unten drücken.


6

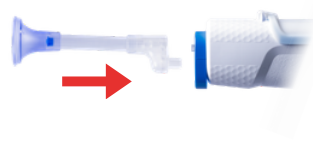

Einsetzen des Spülaufsatzes

Schieben Sie den gewählten Spülaufsatz von vorn in das BlueLavage® Handstück. Achten Sie darauf, dass das Ende des Spülaufsatzes vollständig eingeschoben ist.

7

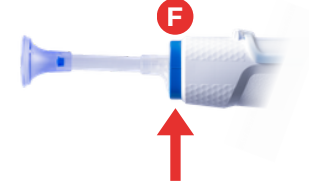

Sichern des Spülaufsatzes

Sobald das Ende des Spülaufsatzes vollständig eingeschoben ist, drücken Sie den blauen Sicherungsclip (D) wieder nach oben. Wenn Sie das Gefühl haben, dass der Sicherungsclip sich nur schwer nach oben schieben lässt, dann sollten Sie nochmals überprüfen, ob das Ende des Spülaufsatzes vollständig eingeschoben ist.

8



Entfernen der DriveUnit

Zum Öffnen des Sicherungsdeckels (E) befinden sich auf beiden Seiten der BlueLavage® hervorgehobene Druckpunkte (G). Durch gleichzeitiges Drücken lässt sich der Deckel öffnen und die DriveUnit kann mithilfe des Sicherungshebel (D) herausgezogen werden.

Wichtige Hinweise zur Sterilität!

Die DriveUnit ist unsteril und sollte niemals von dem sterilen instrumentierenden OP-Mitarbeiter während des Einsetzens berührt werden.

Die Entfernung der Schutzabdeckung nach dem Einsetzen der DriveUnit darf nur von dem "OP-Springer" entfernt werden.

Drücken Sie niemals während des Betriebes die seitlichen Druckpunkte, um ein versehentliches "Aufspringen" des Sicherungsdeckels zu vermeiden.

Die DriveUnit muss nach jedem Einsatz erst wieder vollständig geladen werden, bevor sie wieder genutzt werden kann.

Vertriebsgebiete

Wir leben Nachhaltigkeit nicht nur in unseren Produkten, sondern auch in unserem Vertrieb. Um Ihnen einen reibungslosen und komfortablen Kundenservice zu bieten, haben wir engagierte Vertriebsmitarbeiter in Ihrer Nähe. Dadurch minimieren wir die Anfahrtswege und stellen sicher, dass Sie immer schnell und unkompliziert mit Ihrem Ansprechpartner in Kontakt treten können.



Medical
Fellows™

Heinder Straße 9a
31162 Bad Salzdetfurth
Tel: 05064 960 9092
Fax: 05064 960 8100
E-Mail: service@medicalfellows.de
PLZ-Gebiet: D-01067 bis D-39638

UK
solution.
solutions for your medical device

Sedanstraße 16
58507 Lüdenscheid
Tel: 02351 985241 0
Fax: 02351 985241 49
E-Mail: office@utk-solution.com
PLZ-Gebiet: D-40217 bis D-97980

Artikelübersicht mit Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung	VE	Lieferumfang	
BL2000.1	BlueLavage® Handstück mit Eintrichter und <u>FunnelTip</u> Einwegsystem, steril	20x	1 x 2,5 Meter Zulaufschlauch für Spülflüssigkeit 1 x 2,5 Meter Ablaufschlauch mit Clip für Vakuumpumpe 1 x kurzer Spülansatz mit Trichter für Knie-Endoprothetik	

Optionale Artikel

BL2006.1	BlueLavage® <u>FunnelTip</u> , steril, Länge 130 mm, Öffnung Ø 40 mm, Trichter-Spülaufsatz	10x	Verpackung mit 10 einzeln steril entnehmbaren	
BL2004.1	BlueLavage® <u>LongBoneTip</u> , steril, Länge 240 mm, Femur-Spülaufsatz	20x	Verpackung mit 20 einzeln steril entnehmbaren	
BL2003.1	BlueLavage® <u>BrushTip</u> , steril, Gesamtlänge 300 mm, davon Bürste 60 mm, Femurkanal-Spül- mit Bürstenaufsätzen	20x	Verpackung mit 20 einzeln steril entnehmbaren	
BL2005.1	BlueLavage® DU-Schutzabdeckung, steril, zum sicheren Einführen der DriveUnits	5x	Verpackung mit 5 einzeln steril entnehmbaren	

Investitionsmaterial

BL2001.2	BlueLavage® <u>DriveUnit</u>	2x	Verpackung mit 2 einzelnen DriveUnits, für den Dauereinsatz	
BL2002.02	BlueLavage® <u>DockingStation</u> Ladestation m. Netzteil und Adapter 1 x 4-Fach Ladestation	1x	1 x Netzteil mit 10 V-Ausgang 1 x Landestypische Adapter für das Netzteil	



Disclaimer

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, digital und reprografische Vervielfältigungen sind nur mit schriftlicher Genehmigung der UTK Solution GmbH, Sedanstraße 16, 58507 Lüdenscheid, zulässig.

Zuwiderhandlungen werden rechtlich geahndet. Für sämtliche Angebote, Verkäufe und Lieferungen gelten ausschließlich unsere „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Programm- und Konstruktionsänderungen sowie Abweichungen der tatsächlichen Ausführungen von den Abbildungen bleiben vorbehalten.

Hersteller:

UTK Solution GmbH
Sedanstraße 16
58507 Lüdenscheid
Deutschland

Vertrieben durch:

UTK Solution GmbH
Sedanstraße 16
58507 Lüdenscheid
Deutschland

Tel: + 49 (0) 2351 9852410

Fax: +49 (0) 2351 98524149

E-Mail: office@utk-solution.com

Tel: + 49 (0) 2351 9852410

Fax: +49 (0) 2351 98524149

E-Mail: office@utk-solution.com

BlueLavage-Produktbeschreibung-DE-UTKSolutionGmbH

Rev. 026 Stand Juli 2026